

FemTouch™



AcuPulse™

FemTouch™ и AcuPulse™

Для вагинального омоложения

 **Lumenis®**
Energy to Beauty

FemTouch – **новое решение** для лечения симптомов, связанных с атрофией слизистой влагалища



Около **50%**
женщин в постменопаузе
страдают от **стрессового
недержания мочи¹** и
до **80%**
испытывают симптомы,
связанные с **вагинальной
атрофией²**

С возрастом и после рождения детей женщины начинают отмечать симптомы, связанные с функциональным состоянием слизистой влагалища, которые по-разному могут изменять их образ жизни. Вагинальная атрофия или сухость является частым симптомом у женщин в постменопаузе, который нередко сопровождается зудом или болью, усиливающимися во время полового акта. Стрессовое недержание мочи является еще одним ассоциированным симптомом, возникающим у более молодых женщин, в некоторых случаях уже в возрасте 20-45 лет. Рожавшие женщины довольно часто отмечают симптомы снижения тонуса влагалища, что отрицательно влияет на их сексуальную жизнь.

Система FemTouch создана для лечения симптомов, связанных с морфофункциональным состоянием слизистой влагалища. Фракционный CO₂ лазер воздействует на слизистую стенок влагалища и вульвы, вызывая крайне деликатную контролируемую абляцию и коагуляцию выстилающего эпителия.

Гистологический эффект на слизистой влагалища* – глубина воздействия 200-500 мкм



Поверхностный – 7,5 мДж




Средний – 10 мДж




Глубокий – 12,5 мДж

**исследование ex-vivo на свином препарате*

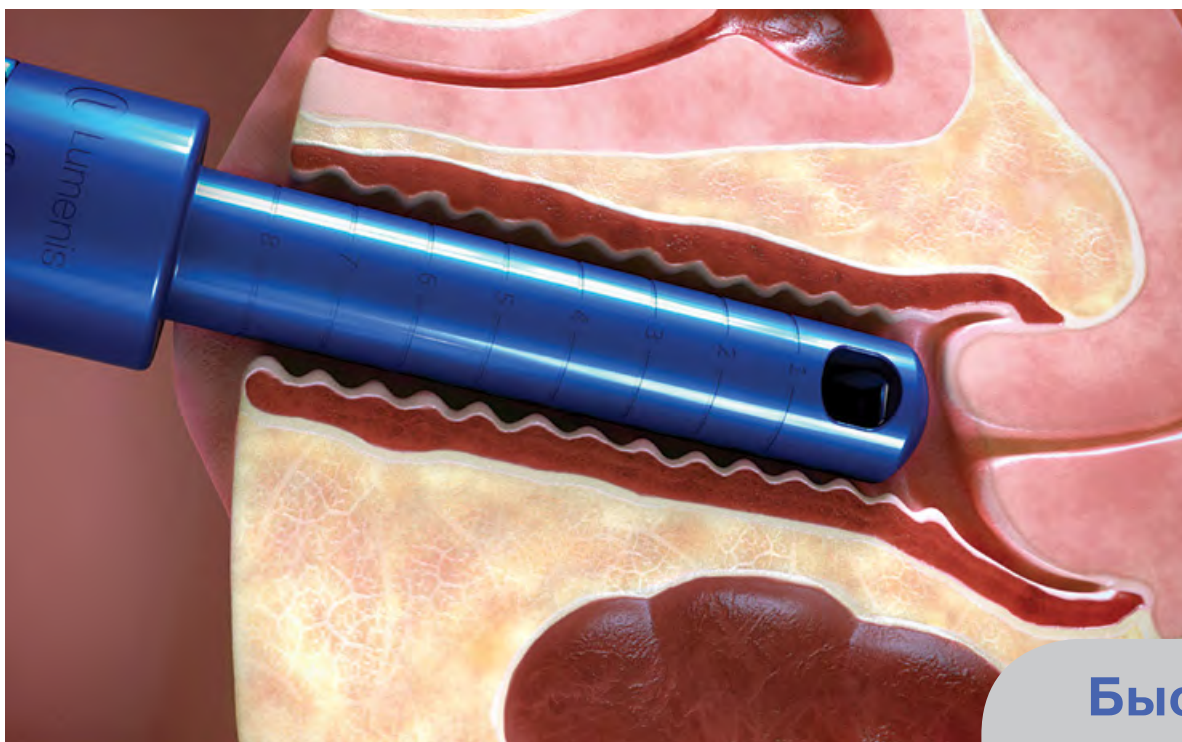


Простая, быстрая и безболезненная амбулаторная процедура

Вагиноскопия задней стенки влагалища – материалы доктора
Massimiliano Marziali

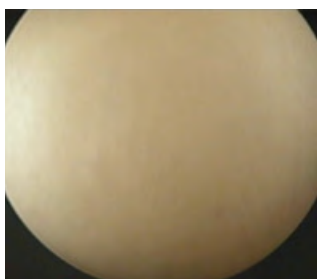

**ПЕРЕД
ПРОЦЕДУРОЙ**
Менее
эластичная
и бледная
слизистая
оболочка –
результат
сниженной
васкуляризации

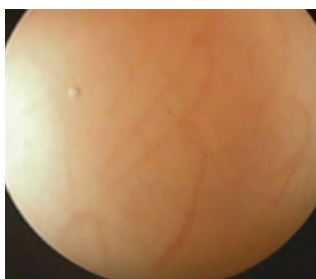

**Сразу
ПОСЛЕ
ПРОЦЕДУРЫ**
Слабое
однородное
воспаления
с видимой
васкуляри-
зацией

Быстро

Процедура выполняется
буквально за несколько
минут

Эффективно

Для оптимальных
результатов необходимо
всего 2-4 процедуры

Просто

Не требуется ни анестезии,
ни специального ухода
после процедуры

FemTouch™ разработана компанией Lumenis, основателем CO₂-лазерной технологии в медицине и гинекологии. Вот уже более двадцати лет гинекологи во всем мире используют CO₂ лазеры Lumenis для вагинальных, роботических и лапароскопических операций. Система FemTouch™ была разработана при сотрудничестве с ведущими гинекологами в области вагинального омоложения.

FemTouch™ на базе AcuPulse™

Технические характеристики

Тип лазера	CO ₂
Длина волны	10,600 нм
Излучение	Непрерывное
Доставка излучения	Фракционная
Режим импульсов	Одиночный, повторный
Энергия	7,5 – 12,5 мДж
Плотность	3-25%
Сертификаты и разрешения	Наличие всех разрешительных документов для применения в медицине.



FemTouch может быть использована совместно со всеми модификациями Lumenis AcuPulse: 40AES-F, 40AES-R, 40AES-A, 40ST и моделями AcuPulse DUO.

Рукоятка FemTouch предназначена для использования во время хирургических и эстетических манипуляций, требующих абляции, вапоризации, иссечения, рассечения и коагуляции мягких тканей в гинекологии. Для более детальной информации по использованию системы ознакомьтесь с руководством пользователя к системам AcuPulse, раздел «клиническое применение» приложений А и Б.

¹ Urinary Incontinence in US Women, A Population-Based Study. Arch Intern Med. 2005

² Vaginal atrophy of women in postmenopause. Results from a multicentric observational study: The AGATA study. Palma F, Volpe A, Villa P, Cagnacci A



Произведено Lumenis Ltd.

Industrial Park, Hakidma 6 Street
P.O.B. 240 Yokneam 2069204, Israel
T +972-4-959-9000

Представитель Lumenis Ltd. по странам Восточной Европы и Средней Азии

Дмитрий Шумило
Москва, ул. Профсоюзная 23
+7 499 213 0155
dmitry.shumilo@lumenis.com



© 2015 Все права защищены.
Группа компаний Lumenis. PB-2003207 RevB – RUS



Официальный дистрибьютор и сервисный центр на территории Российской Федерации и Республики Казахстан:

ООО «САЙНСМЕД»
Москва, ул. Б. Грузинская 70
+7 499 685 1531
info@sc-med.ru
www.sc-med.ru



WWW.LUMENIS.COM/SURGICAL